

Mode d'emploi

EchoIR™

Introduction

Nous vous félicitons pour le choix de EchoIR, un système de transmission par infrarouge commode et très développé ! Ce système vous permet d'écouter la musique ou le programme de télévision au volume préféré sans gêner les autres et sans besoin d'installer une boucle magnétique dans votre appartement. Le microphone ci-joint rend le système encore plus souple à l'utilisation.

Fonctions:

1. Transmet le son (mono) de la télévision / vidéo / chaîne Hi-fi à votre récepteur EchoIR.
2. Transmission de qualité supérieure au récepteur par rayon infrarouge invisible.
3. Réglage automatique du gain (CAG) évitant la surmodulation.
4. Fonction „Mute“ qui élimine le bruit gênant lorsque aucun signal n'est transmis.
5. Le microphone sert à capter le son du poste télévision lorsque celui-ci n'est équipé ni d'une prise SCART ni d'une sortie audio. Placez alors le microphone devant le haut-parleur.

Recommandations

- Orientez la face avant de l'émetteur vers le centre de la pièce. Evitez de l'orienter vers des fenêtres.
- De la lumière intense perturbe la transmission infrarouge (rayons de soleil, lampes fortes). Veillez à un emplacement pas trop illuminé.
- Veillez à une liaison à vue entre émetteur et récepteur. Obstruction du rayon infrarouge diminue la qualité du son (distorsions ou bruit).


Le set EchoIR se compose de:

- 1 Emetteur EchoIR
- 1 Récepteur EchoIR
- 1 Adaptateur réseau 12V DC
- 1 Ecouter stéthoscopique
- 1 Adaptateur SCART avec sortie audio
- 1 câble audio (fiche 3.5mm sur 2x cinch)
- 1 piles AAA 1,5 V pour le récepteur
- 1 Collier magnétique

Cet appareil est garanti 1 an

Emetteur EchoIR

Récepteur EchoIR

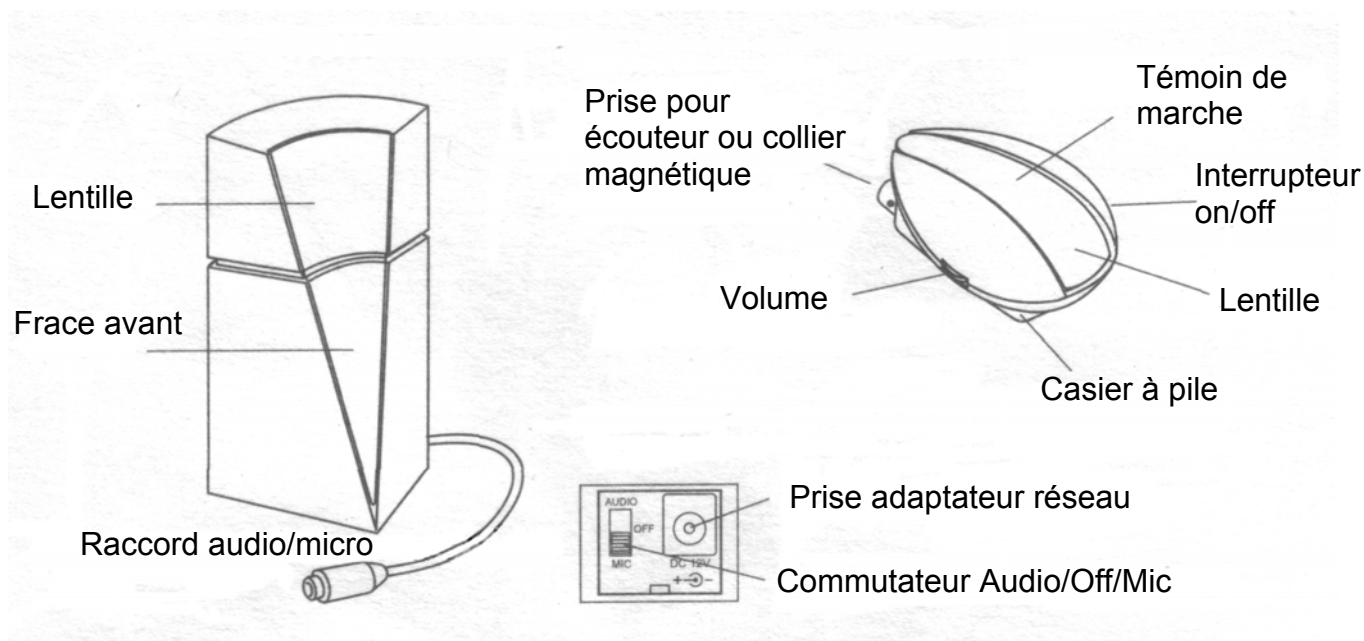

Mise en service

1. Branchez l'adaptateur réseau sur une prise électrique et enfichez le câble à l'arrière de l'émetteur (DC12V).
2. Reliez la source sonore au raccord audio/micro de l'émetteur utilisant la bonne combinaison d'adaptateur SCART et câble audio. Enclenchez la source sonore.
3. Glissez le commutateur à l'arrière de l'émetteur sur position „AUDIO“.
4. Orientez la face avant de l'émetteur vers le centre de la pièce. Placez l'émetteur de préférence un peu plus haut que le récepteur, afin d'obtenir le meilleur rendement.
5. Placez les piles dans le casier du récepteur en veillant à leur bonne polarité (en dessous du clip détachable en le basculant).
6. Enfichez l'écouteur (ou le collier magnétique) dans le récepteur. Mettez le récepteur sur position „ON“. Veillez à une liaison à vue entre émetteur et récepteur.
7. Réglez le volume selon vos besoins.
8. Si vous utilisez EchoIR avec SCART/Audio vous pouvez obtenir un signal plus puissant en glissant le commutateur à l'arrière de l'émetteur sur position „MIC“.

Collier magnétique

Si vous portez un appareil acoustique, branchez le sur position „T“ et servez-vous du collier magnétique à la place de l'écouteur.

Option Microphone

Votre poste de télévision dispose ni d'une prise SCART, ni d'une sortie audio ? Branchez alors le microphone au raccord audio/micro de l'émetteur et fixez le tout près du haut-parleur. Glissez le commutateur à l'arrière de l'émetteur sur position „MIC“. Réglez le volume du poste télévision de sorte à obtenir un son clair sans distorsions.